



# 2024

B.A. International  
製品カタログ



High Quality Products  
With High Quality Service

# B.A.Internationalについて

## 会社概要

B.A.Internationalは、イギリスのノーサンプトンに拠点を置くハンドピース修理会社として1989年に設立されました。自社ブランドのハンドピースを2002年に発表以降、超音波スケーラーやインプラント機器等の小型機器を製品ラインナップに追加し、成長してきました。



Headquarters, Northampton, U.K.



## 世界的な展開

B.A.Internationalは、世界12か国の拠点から50か国以上の地域に対して販売をしており、10万人以上の歯科医師が弊社のハンドピースを使用しています。新たに2019年より日本に販売拠点を設立し、サービスの提供をスタートしました。



販売拠点：イギリス・スペイン・ドイツ・オランダ  
 イタリア・フランス・オーストラリア・イスラエル  
 南アフリカ・タイ・韓国・日本

## B.A.Internationalの強み

1989年の創業以来、B.A.Internationalはハンドピースの修理サービスを提供し、現在ではヨーロッパ最大のハンドピース修理会社として事業を展開しています。「高い機能と耐久性を備えた製品の供給」、「安心して使用していただけるアフターサービス体制」を確立することで、業界をリードする質の高いサービスを提供しています。



## カタログご利用方法

### ■ 製品ページの見方

各ハンドピースの機能は機能一覧ページでご参照いただけます。

#### BA タービンの機能一覧

**ダイナミックパワーコントロール**

このダイナミックコントロール機能により、257回転/分の安定したトルクでスムーズな動作を行うことができます。歯質に出力をあげずに回転速度を調整できるため、タービンを口腔内から取り出したときに、ノイズレベルを低減します。

※詳細情報：アルティメットパワープラス | アルティメット

**クイックストップ**

クイックストップ機能により、日常使用による歯質の劣化を防止、フットペダルを離してからの回転の停止にかかるまでの時間を短縮しました。これにより、バーを交換した際、タービンを口腔内から取り出したときに、歯質劣化が抑えられ、ハンドピースの寿命を延ばすのに役立ちます。

※詳細情報：アルティメットパワープラス | アルティメット | アルティメット

機能搭載機種      機能名/機能説明

### ■ バー形態表の見方

P15「バー形態表の見方」をご参照ください。

- 10日間返品保証  
対象商品マーク
- 製品ページQRコード
- アイコン表記
- 型式

ページ内にこのマークが付いている製品は10日間返品保証(P21)の対象商品です。

WEBサイト内製品ページへのリンクです。WEBサイトからのご注文も承っておりますので是非ご利用ください。(P20)

オートクレーブ滅菌可

ウォッシャーディスインフェクター対応

※ 各項目の位置はページにより異なります。

# Welcome

to the 2023 B.A.International turbine & contra

ハンドピースは先生や患者様と「最も近い」場所で働く道具です。安全に最高の治療をしていただくためには、切削力、静粛性、感染防止機能などの品質面のみならず、価格や保証、メンテナンスも重要と考えます。快適にご利用いただけるよう最高のサービスをご提供すること、それが私たちの信条です。



## 目次

- B.A.Internationalについて ..... P2
- BAハンドピース ..... P3
  - ・ハンドピースラインナップ ..... P4
  - ・BA タービンの機能一覧 ..... P6
  - ・BA アルティメットパワープラス タービン ..... P7
  - ・BA アルティメット タービン ..... P8
  - ・BA オプティマ タービン ..... P9
  - ・BA コントラアングルの機能一覧 ..... P10
  - ・BA アルティメットパワープラス コントラアングル&ストレート ..... P11
  - ・BA アルティメット コントラアングル ..... P12
  - ・BA カップリング / オイル&注油ノズル ..... P13
- BAアルティメットバー ..... P14
  - ・BA アルティメットカーバイドバー ..... P16
  - ・BA アルティメットダイヤモンドバー ..... P17
  - ・ご利用ガイド ..... P20
  - ・ハンドピースメンテナンスサービス ..... P22

# ハンドピースラインナップ

「機能」「価格」「保証期間」の異なる3つのハンドピースをご用意しました。

## タービンラインナップ



### PREMIUM



#### アルティメットパワープラスタービン

プレミアムクラス / 2年保証 / ライト付き

10日間返品保証対象

#### パワーヘッドタービン

BA755L

#### ミニヘッドタービン

BA758L

対応カップリング

KaVo® / Bien Air® / NSK® / W&H® / Sirona®



ドイツ製 掲載ページ

チタンボディ  
セラミックベアリング  
ダイナミックパワーコントロール  
最大22Wトルク  
クイックストップ機能  
サックバック防止機能  
静音設計58db  
エルゴノミクスデザイン  
洗浄滅菌カセット付き



製品ページ



### MIDDLE



#### アルティメットタービン

ミドルクラス / 2年保証 / ライト付き

10日間返品保証対象

#### パワーヘッドタービン

BA695L

#### ミニヘッドタービン

BA688L

対応カップリング

KaVo® / Bien Air® / NSK® / W&H® / Sirona®



ドイツ製 掲載ページ

チタンボディ  
セラミックベアリング  
ダイナミックパワーコントロール  
最大22Wトルク  
クイックストップ機能  
サックバック防止機能  
静音設計58db  
スマートコートボディ



製品ページ



### ENTRY



#### オプティマタービン

エントリークラス / 1年保証 / ライト付き

10日間返品保証対象

#### スタンダードヘッドタービン

BA525L

#### ミニヘッドタービン

BA528L

対応カップリング

KaVo® / NSK® / Yoshida® / Morita® / Osada®



台湾製 掲載ページ

ステンレスボディ  
セラミックベアリング  
最大23Wトルク  
クイックストップ機能  
サックバック防止機能  
スリップ防止グリップ



製品ページ

## コントラアングル・ストレートラインナップ



### PREMIUM



#### アルティメットパワープラス コントラアングル・ストレート

プレミアムクラス / 3年保証 / ライト付き

10日間返品保証対象

#### 1:1 等速コントラ

BA40LSS

#### 1:5 増速コントラ

BA200LTS

#### 6:1 減速コントラ

BA60LSS

#### 1:1 等速ストレート

BA280LSS



ドイツ製 掲載ページ

DLCコーティングベアリング  
セラミックベアリング  
エルゴノミクスデザイン  
チタン製ボディ  
スマートコートボディ  
低騒音  
軽量66グラム \*ストレートは74グラム  
コンパクトヘッド  
ISOスライダ



製品ページ



### MIDDLE



#### アルティメットコントラアングル

ミドルクラス / 2年保証 / ライト付き・ライト無し

10日間返品保証対象

#### 1:1 等速コントラ

BA45LS / ライト付き

BA45S / ライトなし

#### 1:5 増速コントラ

BA250LT / ライト付き

BA250T / ライトなし

#### 6:1 減速コントラ

BA65LS / ライト付き

BA65S / ライトなし



ドイツ製 掲載ページ

セラミックベアリング  
エルゴノミクスデザイン  
チタン製ボディ  
スマートコートボディ  
低騒音  
軽量66グラム  
コンパクトヘッド  
ISOスライダ



製品ページ

## BA タービンの機能一覧

### ダイナミックパワーコントロール

- このダイナミックコントロール機能により、25万回転/分の安定したトルクでスムーズな切削を行うことができます。無理に出力をあげずに、低回転で治療ができるため、歯牙への熱的損傷を防ぐとともに、ノイズレベルを低減します。

搭載機種: **アルティメットパワープラス** **アルティメット**

### クイックストップ

- クイックストップ機能により、圧縮空気による慣性の影響を抑え、フットペダルを離してから回転が完全にとまるまで約2秒にまで縮めました。これにより、バーを交換したり、タービンを口腔内から取り出したりといった作業効率が上がり、ハンドピースの寿命を延ばすのにも役立ちます。

搭載機種: **アルティメットパワープラス** **アルティメット** **オプティマ**

### セラミックベアリング

- セラミックベアリングは硬くかつ軽く、スムーズに回転するためハンドピースの騒音や振動を低減します。またセラミックベアリングは高速回転時にも発熱が少なく、ハンドピースを長持ちさせます。高速回転や切削負荷、オートクレーブの高温といった過酷な使用状況に耐えるため、厳しい基準で製造されたドイツ製の高級セラミックベアリングを組み込んでいます。

搭載機種: **アルティメットパワープラス** **アルティメット** **オプティマ**

### 逆止弁機構

- 逆止弁機構は、水の吸い込みとともに汚染物質がモーターやホースに吸引されるのを防ぎ、交差感染対策をサポートします。

搭載機種: **アルティメットパワープラス** **アルティメット**

### チタン製ボディ

- チタンは非常に丈夫で耐摩耗性がありながら軽量な材料です。また、グローブをした際にもグリップ性にも優れ、清潔感のある外観を維持します。

搭載機種: **アルティメットパワープラス** **アルティメット**

### スマートコートボディ

- PVD(物理蒸着)処理を施した特殊コーティングです。傷がつきにくく、グローブを着用しても滑りにくいため、操作性を向上させます。

搭載機種: **アルティメット**

### ステンレス製ボディ

- 錆びにくくて丈夫なステンレス製のボディです。

搭載機種: **オプティマ**

### グラスロッドライト

- ライトシステムは、25,000ルクスの明るさで、操作環境に最適な照度を提供します。

搭載機種: ライト付き機種のみ **アルティメットパワープラス** **アルティメット** **オプティマ**

### スリップ防止グリップ

- 独自のプラスチック加工により、ハンドピース表面の耐摩耗性・耐食性を高め、同時にグリップ性を向上しました。

搭載機種: **オプティマ**

### サックバック防止機能

- 今まで以上に、患者様とスタッフの安全が重要な時代です。カートリッジに組み込まれた回転停止システムにより、ヘッドへの汚染物質の侵入(サックバック)を低減します。

搭載機種: **アルティメットパワープラス** **アルティメット** **オプティマ**



# BA Ultimate Power+

## BA アルティメットパワープラス タービン



常に BA の最高峰であり続けるために、自らを革新し続けます。

BA アルティメットパワープラスタービンは、洗練されたデザインとドイツのクラフトマンシップが生んだ

BA のプレミアムクラスタービンです。

2年保証

パワーヘッド



φ11.9×H13mm

ミニヘッド



φ10.2×H12.7mm

## Key Features

- チタンボディ
- セラミックベアリング
- ダイナミックパワーコントロール
- クイックストップ機能
- サックバック防止機能
- 静音設計58db
- エルゴノミクスデザイン
- 洗浄滅菌カセット付き



製品ページ

### 対応カップリング



### BA アルティメットパワープラス タービン 販売価格はホームページでご確認ください

ヘッド	ライト	型式	対応カップリング	回転数	最高出力	注水
パワーヘッド	○	BA755L	KaVo®・Bien Air®・NSK®・W&H®・Sirona®	360,000Rpm +/-10%	22W	4点注水
ミニヘッド	○	BA758L	KaVo®・Bien Air®・NSK®・W&H®・Sirona®	400,000Rpm +/-10%	19W	4点注水

### 洗浄滅菌カセット(付属品)

型式 仕様  
BAME010 W185×D145×H35mm  
※ タービンおよそ10本程度収納可能



Made in Germany



販売名: BA アルティメットタービンハンドピース  
一般的名称: 歯科用ガス圧式ハンドピース  
認証番号: 230AGBZX00119000  
管理医療機器 特定保守管理医療機器



# BA Ultimate

## BA アルティメット タービン



パワフルに削り、きちんと止まる。すべての先生に快適なプレレーションを。  
BA アルティメットタービンは BA ミドルクラスのタービンです。

2年保証



### Key Features

- チタンボディ
- セラミックベアリング
- ダイナミックパワーコントロール
- クイックストップ機能
- サックバック防止機能
- 静音設計58db
- スマートコートボディ



製品ページ



#### 対応カップリング

- KaVo®カップリング
- Bien Air®カップリング
- NSK®カップリング
- W&H®カップリング
- Sirona®カップリング

BA アルティメット タービン 販売価格はホームページでご確認ください

ヘッド	ライト	型式	対応カップリング	回転数	最高出力	注水
パワーヘッド	○	BA695L	KaVo®・Bien Air®・NSK®・W&H®・Sirona®	360,000Rpm +/-10%	22W	4点注水
ミニヘッド	○	BA688L	KaVo®・Bien Air®・NSK®・W&H®・Sirona®	400,000Rpm +/-10%	19W	4点注水

Made in Germany



販売名: BA アルティメット タービンハンドピース  
一般的名称: 歯科用ガス圧式ハンドピース  
認証番号: 230AGBZX00119000  
管理医療機器 特定保守管理医療機器



# BA Optima

## BA オプティマタービン



パワフルなトルクとサックバック防止機能を搭載した  
BA エントリーモデルのタービンです。

1年保証



### Key Features

- ステンレスボディ
- セラミックベアリング
- クイックストップ機能
- サックバック防止機能
- スリップ防止グリップ



製品ページ



#### 対応カップリング

- KaVo®カップリング
- NSK®カップリング
- Yoshida®カップリング
- Morita®カップリング
- Osada®カップリング

BA オプティマタービン 販売価格はホームページでご確認ください

ヘッド	ライト	型式	対応カップリング	回転数	最高出力	注水
スタンダードヘッド	○	BA525L	KaVo®・NSK®・Yoshida®・Morita®・Osada®	320,000Rpm +/-10%	23W	4点注水
ミニヘッド	○	BA528L	KaVo®・NSK®・Yoshida®・Morita®・Osada®	400,000Rpm +/-10%	21W	4点注水

Made in Taiwan



販売名: BA オプティマタービンハンドピース  
一般的名称: 歯科用ガス圧式ハンドピース  
認証番号: 302AGBZX00054000  
管理医療機器 特定保守管理医療機器

## BA コントラアングルの機能一覧

### DLCコーティングベアリング

- セラミックベアリングにDLC(ダイヤモンドライクカーボン)表面処理を施すことにより、振動を抑え、静音性が向上しました。また、DLCコーティングベアリングは注油オイルを吸収するため、耐久性も向上しました。

搭載機種: **アルティメットパワープラス**

### セラミックベアリング

- セラミックベアリングは硬くかつ軽く、スムーズに回転するためハンドピースの騒音や振動を低減します。またセラミックベアリングは高速回転時にも発熱が少なく、ハンドピースを長持ちさせます。高速回転や切削負荷、オートクレープの高温といった過酷な使用状況に耐えるため、厳しい基準で製造されたドイツ製の高級セラミックベアリングを組み込んでいます。

搭載機種: **アルティメットパワープラス** **アルティメット**

### エルゴノミクスデザイン

- エルゴノミクス(人間工学)に基づいたグリップしやすいデザイン。長時間作業しても疲れがこない形状を目指しました。

搭載機種: **アルティメットパワープラス** **アルティメット**

### チタン製ボディ

- チタンは非常に丈夫で耐摩耗性がありながら軽量の材料です。またグローブをした際にもグリップ性にも優れ、清潔感のある外観を維持します。

搭載機種: **アルティメットパワープラス** **アルティメット**

### スマートコートボディ

- PVD(物理蒸着)処理を施した特殊コーティングです。傷がつきにくく、またグローブを着用しても滑りにくく、操作性を向上させます。

搭載機種: **アルティメット**

### グラスロッドライト

- ライトシステムは、25,000ルクスの明るさで、操作環境に最適な照度を提供します。

搭載機種: 光つき機種のみ **アルティメットパワープラス** **アルティメット**

### 低騒音

- 内部構造と外装の間に、ダンパーを使用することで振動を低減。内部構造が回転することで発生した振動や音を吸収し、外装に伝わらないようになっています。使用者の手やパーに振動が伝わらないため、精密な作業を行うことに適しています。

搭載機種: **アルティメットパワープラス** **アルティメット**

### 軽量66グラム\*

- 毎日、長時間使用していると手や腕の筋肉や神経に繰り返しストレスがかかるため、少しの重量差が大きな違いを生みます。手が小さいユーザーや握力の強くないユーザーは特に疲労がたまりやすいため、軽いハンドピースをおすすめします。

\* ストレートは74グラム

搭載機種: **アルティメットパワープラス** **アルティメット**

### ISOスライダー

- ライトガイドがスライドする「ISOスライダー」を採用。ライトあり/なし どちらのモーターにも接続可能です。

搭載機種: **アルティメットパワープラス** **アルティメット**



# BA Ultimate Power+

## BA アルティメットパワープラス コントラアングル&ストレート



ドイツが築き上げてきた哲学と情熱が生んだハンドピース。  
品質にこだわった BA プレミアムモデルです。

3年保証



製品ページ



BA アルティメットパワープラス 等速コントラ

速度比	ライト	型式
1:1等速	○	BA40LSS

ヘッドサイズ φ8.7×H12.4mm  
注水 1点注水

販売価格はホームページでご確認ください



BA アルティメットパワープラス 1:5増速コントラ

速度比	ライト	型式
1:5増速	○	BA200LTS

ヘッドサイズ φ8.7×H14.6mm  
注水 4点注水

販売価格はホームページでご確認ください



BA アルティメットパワープラス 6:1減速コントラ

速度比	ライト	型式
6:1減速	○	BA60LSS

ヘッドサイズ φ8.7×H12.4mm  
注水 1点注水

販売価格はホームページでご確認ください



BA アルティメットパワープラス 等速ストレート

速度比	ライト	型式	注水
1:1等速	○	BA280LSS	内部注水

販売価格はホームページでご確認ください

Made in Germany   
販売名: BA アルティメット ギアードハンドピース  
一般的名称: ストレート・ギアードアングルハンドピース  
認証番号: 230AGBZX00120000  
管理医療機器 特定保守管理医療機器



# BA Ultimate

## BA アルティメット コントラアングル

新しい時代に、新しい相棒。  
使いやすさとリーズナブルな価格にこだわったミドルクラスモデルです。

2年保証



製品ページ



### BA アルティメット 等速コントラ

速度比	ライト	型式
1 : 1等速	○	BA45LS
1 : 1等速	×	BA45S

ヘッドサイズ φ8.7×H12.4mm  
注水 1点注水  
販売価格はホームページでご確認ください



### BA アルティメット 1.5増速コントラ

速度比	ライト	型式
1 : 5増速	○	BA250LT
1 : 5増速	×	BA250T

ヘッドサイズ φ8.7×H14.6mm  
注水 4点注水  
販売価格はホームページでご確認ください



### BA アルティメット 6:1減速コントラ

速度比	ライト	型式
6 : 1減速	○	BA65LS
6 : 1減速	×	BA65S

ヘッドサイズ φ8.7×H12.4mm  
注水 1点注水  
販売価格はホームページでご確認ください

Made in Germany   
販売名:BA アルティメット ギアードハンドピース  
一般的名称:ストレート・ギアードアングルハンドピース  
認証番号:230AGBZX00120000  
管理医療機器 特定保守管理医療機器

# BA Couplings

## カップリング



製品ページ



BA565 Ultimate - Optic 販売価格はホームページでご確認ください		
仕様	ライト	型式
NSK®ハロゲンライトカップリング	ハロゲン	BA565
NSK® LEDカップリング	LED	BA565LED



BA560 Ultimate - Optic 販売価格はホームページでご確認ください		
仕様	ライト	型式
KaVo® ハロゲンライトカップリング 水量調整機能付き	ハロゲン	BA560
KaVo® LEDカップリング 水量調整機能付き	LED	BA560LED



BA360LED Optima - Optic 販売価格はホームページでご確認ください		
仕様	ライト	型式
KaVo® LEDカップリング	LED	BA360LED

# BA Oil & nozzles

## オイル & 注油用ノズル



製品ページ



BA アルティメット スプレーオイル(500ml)	
型式	数量
BAOIL	1本

販売価格はホームページでご確認ください  
※ 沖縄および離島へのオイルの出荷はできません



BA アルティメットスプレーオイル 注油ノズル		
仕様	型式	
A W&H® タイプ	NOZW	
B Bien Air® タイプ	NOZBAIR	
C Sirona® タイプ	NOZS	
D KaVo® タイプ	NOZK	
E NSK® タイプ	NOZN	
F コントラ・ストレート用	NOZE	
G 4ホールホース用	NOFB	

販売価格はホームページでご確認ください  
※ 色や材質は予告なく変更になる場合があります

# Welcome

to the B.A.International Ultimate Bur

BA アルティメットバーは「プレににくい」「折れにくい」「パワフルに削れる」といった品質面と、毎日の診療にご利用いただきやすい価格面の両立を目指した歯科用バーのブランドです。

イギリス製の BA アルティメットカーバイドバー・ダイヤモンドバーは、切削能力が最大化されるよう緻密にデザインされ、最先端の CNC マシンが稼働する英国工場です。

快適な治療環境を整えていただけるよう、最高の製品・サービスをご提供することそれが私たちの信条です。



製品ページ

## BA アルティメットカーバイドバー

作業部と軸部を削り出した「ワンピース」カーバイドバーで高い切削能力を実現。切削時の破断を低減し、スピーディーで正確な治療をサポートします。

### 「高い切削能力」

- BA アルティメットカーバイドバーは、1本のカーバイドを削り出して製造される「ワンピースカーバイドバー」です。作業部と軸部が溶接されて製造されるバーと異なり、作業部と軸部の中心が同一であるため、切削対象物にかかる力を一定に保つことができ、スピーディーに切削することが出来ます。
- 軸フレせず、切削断面がスムーズになります。
- 独自デザインされた作業部（刃）デザインにより、スピーディーに切削することができます。

### 「破断を低減」

- 作業部が溶接されない一体型のため、切削時にバーにかかる負担を全体に逃し、切削時バーの破断リスクを低減します。

一般医療機器 (クラス I)  
販売名: BA アルティメット カーバイドバー  
一般的名称: 歯科用カーバイドバー (16668000)  
医療機器届出番号: 27B2X00331000001

## BA アルティメットバー

2021年、B.A.International社は「アルティメットカーバイドバー」および「アルティメットダイヤモンドバー」を発表しました。「プレににくい」「折れにくい」「パワフルに削れる」といった切削品質と、ご利用いただきやすい価格面を両立し、毎日の治療をより快適にします。

### 品質の裏付け

BA アルティメットカーバイドバーとダイヤモンドバーは、イギリスにある歯科用バー工場が開発・設計されました。最新スライス型 CNC マシンを大量に導入し、コンピューター数値制御による精密加工を徹底した結果、切削能力と耐久性を最大限に引き出した歯科用バーの大量生産を実現しました。



## BA アルティメットダイヤモンドバー

BA アルティメットダイヤモンドバーは「振動のしにくさ」と「パワフルな切削力」を併せ持つことが特徴です。効率よく切削しながら、なめらかな仕上がりを実現します。

### 「振動しにくくパワフルな切削面」

- コンピューター制御により、切削作業部の同心円状にダイヤモンド粒子を緻密に配分。
- 振動を抑え、パワフルな切削力となめらかな仕上がりを実現します。

### 「切削力が持続」

- 複数層に渡ってダイヤモンド粒子を埋め込み。
- バーの切削力が持続し、より長くご使用いただけます。

### 「ジルコニアダイヤモンドバー」

- 独自開発の特殊黒色保護コーティング技術と、ジルコニアダイヤモンド粒子を使用。
- 強度のある素材に対しても、強力な切削力を発揮。
- 切削熱を低減。
- 微小亀裂を低減し、仕上がりがなめらか。

一般医療機器 (クラス I)  
販売名: BA アルティメットダイヤモンドバー  
一般的名称: 歯科用ダイヤモンドバー (16670000)  
医療機器届出番号: 27B2X00331000002

#### ダイヤモンド粒度規格\*

- ミディアム: 106-205 μ
- ファイン: 53-63 μ
- エクストラファイン: 20-30 μ

\*ISO 規格に準拠

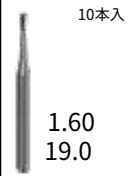
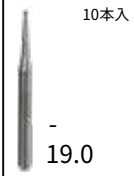
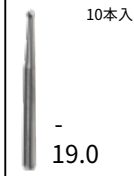
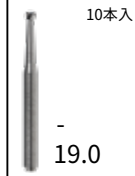
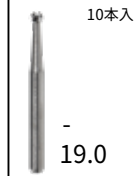
#### ■ バー形態表の見方

5本入	○	1パック入数
TF-41	○	形態番号 ※ダイヤモンドバーのみ
3.50	○	作業部長(mm)
19.0	○	全長(mm)
845・011	○	形状・作業部最大径
ミディアム	○	ダイヤモンド粒度 ※ダイヤモンドバーのみ
BAJ900950	○	注文番号

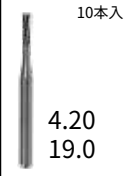
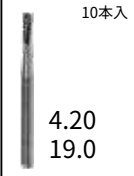


## オペレーティブ カーバイドFGバー


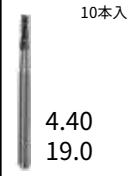
販売価格はホームページでご確認ください

ペアー		ラウンド			
 10本入 1.60 19.0	 10本入 1.70 19.0	 10本入 - 19.0	 10本入 - 19.0	 10本入 - 19.0	 10本入 - 19.0
330・008	331・010	1/2・006	2・010	3・012	4・014
BA950110	BA950120	BA950000	BA950010	BA950020	BA950030



### フラット フィッシャー クロスカット

 10本入 4.20 19.0	 10本入 4.20 19.0
557・010	558・012
BA950140	BA950150


### テーパード フィッシャー クロスカット

 10本入 4.20 19.0	 10本入 4.40 19.0
701・012	702・016
BA950160	BA950170


### ドームド フィッシャー クロスカット

 10本入 4.20 19.0	 10本入 4.20 19.0
1557・010	1558・012
BA950190	BA950180

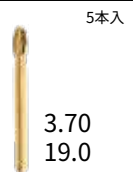
### アマルガム ブレップ

 10本入 3.00 19.0
245・009
BA950100

### ニードル12ブレード フィニッシング

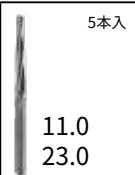
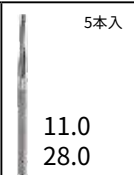
 5本入 3.80 20.0
7901・009
BA950380

### エッグ12ブレード フィニッシング

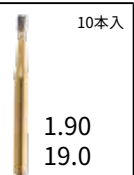
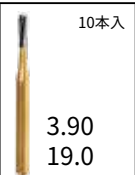
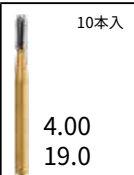
 5本入 3.70 19.0
7406・018
BA950420

## サージカル&メタルカutting カーバイドFGバー

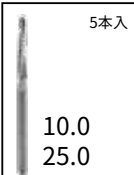
### サージカル 151-Z

 5本入 11.0 23.0	 5本入 11.0 28.0
151-Z・015	151L-Z・015
BA950270	BA950280

### メタルカutting

 10本入 1.90 19.0	 10本入 3.90 19.0	 10本入 4.00 19.0
331T・010	1557T・010	1558T・012
BA951020	BA951040	BA951050

### サージカル リンデマン クロスカット

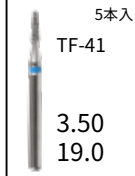
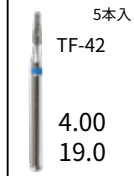
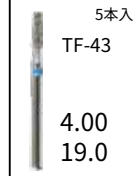
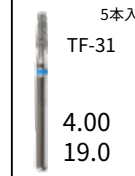
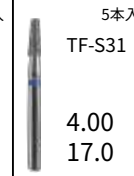
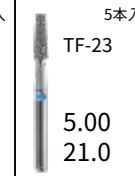
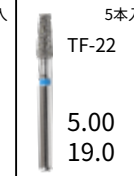
 5本入 10.0 25.0
162・016
BA950310

## ダイヤモンドFGバー

販売価格はホームページでご確認ください

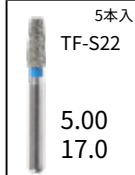
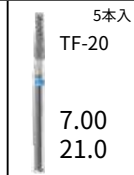
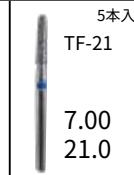
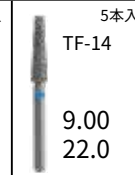
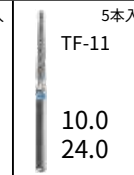
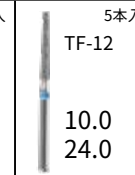
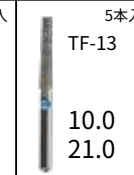
### テーパードフラットエンド

\*SS=ショートシャンク

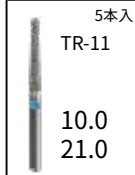
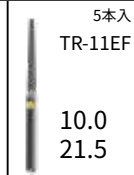
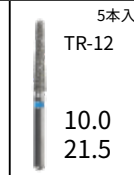
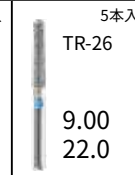
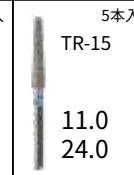
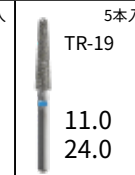
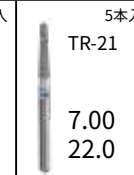
 5本入 TF-41 3.50 19.0	 5本入 TF-42 4.00 19.0	 5本入 TF-43 4.00 19.0	 5本入 TF-31 4.00 19.0	 5本入 TF-S31 4.00 17.0	 5本入 TF-23 5.00 21.0	 5本入 TF-22 5.00 19.0
845・011	845・012	845・014	845・016	845(SS)・016	845・018	845・021
ミディアム	ミディアム	ミディアム	ミディアム	ミディアム	ミディアム	ミディアム
BA900950	BA900960	BA900970	BA900380	BA900390	BA901020	BA900400

### テーパードフラットエンド

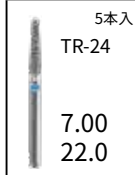
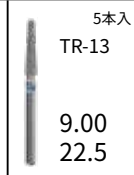

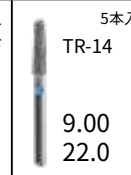
\*SS=ショートシャンク

 5本入 TF-S22 5.00 17.0	 5本入 TF-20 7.00 21.0	 5本入 TF-21 7.00 21.0	 5本入 TF-14 9.00 22.0	 5本入 TF-11 10.0 24.0	 5本入 TF-12 10.0 24.0	 5本入 TF-13 10.0 21.0
845(SS)・021	846・014	846・016	847・023	848・014	848・016	848・018
ミディアム	ミディアム	ミディアム	ミディアム	ミディアム	ミディアム	ミディアム
BA900980	BA900990	BA901010	BA901030	BA901000	BA901040	BA901060

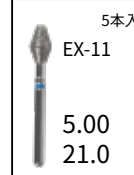
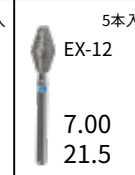
### テーパードラウンドエンド

 5本入 TR-11 10.0 21.0	 5本入 TR-11EF 10.0 21.5	 5本入 TR-12 10.0 21.5	 5本入 TR-26 9.00 22.0	 5本入 TR-15 11.0 24.0	 5本入 TR-19 11.0 24.0	 5本入 TR-21 7.00 22.0
850・016	850・016	850・016	850・018	850L・022	850L・024	855・016
ミディアム	エクストラファイン	ミディアム	ミディアム	ミディアム	ミディアム	ミディアム
BA901090	BA900270	BA900280	BA901170	BA901120	BA901130	BA901140

### テーパードラウンドエンド

 5本入 TR-24 7.00 22.0	 5本入 TR-13 9.00 22.5	 5本入 TR-13EF 9.00 22.0	 5本入 TR-14 9.00 22.0
855・018	856・018	856・018	856・022
ミディアム	ミディアム	エクストラファイン	ミディアム
BA901150	BA900030	BA900070	BA901110





### バレル

 5本入 EX-11 5.00 21.0	 5本入 EX-12 7.00 21.5
811・032	811・035
ミディアム	ミディアム
BA900460	BA900470



## ダイヤモンドFGバー

販売価格はホームページでご確認ください




### フレーム

 5本入 FO-42EF 7.50 22.0	 5本入 FO-21 7.00 22.0	 5本入 FO-22 7.00 22.0	 5本入 FO-11 10.0 24.0
862・012	862・014	862・016	863・012
エクストラファイン	ミディアム	ミディアム	ミディアム
BA900620	BA900560	BA900570	BA900510




### インバーテッドコーン ウィズカラー

 5本入 DI-41 2.30 19.0	 5本入 DI-42 3.00 19.0
806・010	806・014
ミディアム	ミディアム
BA900440	BA900450





### インバーテッドコーン

 5本入 SI-46 1.20 19.0	 5本入 SI-47 1.80 19.0	 5本入 SI-48 1.90 19.0
805・012	805・014	805・016
ミディアム	ミディアム	ミディアム
BA900730	BA900740	BA900750



### フットボール

 5本入 FO-30EF 3.50 19.0	 5本入 FO-25 5.00 19.0	 5本入 FO-27 5.00 19.0
368・016	368・028	368・032
エクストラファイン	ミディアム	ミディアム
BA900340	BA900600	BA900610




### ポイントッドコーン

 5本入 TC-26 6.00 21.0	 5本入 TC-21 8.00 22.0	 5本入 TC-11 10.0 24.0	 5本入 TC-11EF 10.0 24.0
852・012	858・014	859・016	859・016
ミディアム	ミディアム	ミディアム	エクストラファイン
BA900940	BA900920	BA900870	BA900060




### シリンダーピベルド

 5本入 SO-20 6.00 21.0	 5本入 SO-21 8.00 22.0
877・012	878・014
ミディアム	ミディアム
BA900770	BA900780

### シリンダーラウンドエンド

 5本入 SR-11 8.00 21.0	 5本入 SR-12 8.00 22.0	 5本入 SR-13 8.00 22.0
881・012	881・014	881・016
ミディアム	ミディアム	ミディアム
BA900790	BA900800	BA900810




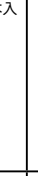
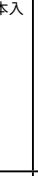
### ラウンドウィズカラー

 5本入 BC-43 2.10 19.0	 5本入 BC-42 2.30 19.0	 5本入 BC-31 2.20 19.0
802・012	802・014	802・018
ミディアム	ミディアム	ミディアム
BA900430	BA900420	BA900410




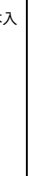
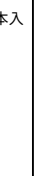
## ダイヤモンドFGバー

販売価格はホームページでご確認ください




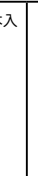
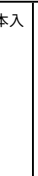
### ラウンド

 5本入 BR-49 0.80 19.0	 5本入 BR-45 1.00 19.0	 5本入 BR-46 1.20 19.0	 5本入 BR-41 1.40 19.0	 5本入 BR-31 1.80 19.0
801・008	801・010	801・012	801・014	801・018
ミディアム	ミディアム	ミディアム	ミディアム	ミディアム
BA900040	BA900010	BA900080	BA900100	BA900190

### ペアー




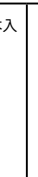
 5本入 EX-41 3.00 19.0	 5本入 EX-26 5.00 19.0	 5本入 EX-31 4.00 19.0	 5本入 EX-20 5.00 19.0	 5本入 EX-21 5.00 19.0	 5本入 EX-21EF 5.00 19.0
830・010	830・032	830L・014	830L・018	830L・021	830L・021
ミディアム	ミディアム	ミディアム	ミディアム	ミディアム	エクストラファイン
BA900500	BA900310	BA900480	BA900490	BA900290	BA900300

### シリンダーフラットエンド

 5本入 SF-41 4.00 19.0	 5本入 SF-31 4.50 19.0	 5本入 SF-21 7.00 21.0	 5本入 SF-11 8.00 22.0	 5本入 SF-12 8.00 22.0
835・010	835・013	836・014	837・012	837・014
ミディアム	ミディアム	ミディアム	ミディアム	ミディアム
BA900670	BA900660	BA900680	BA900700	BA900710

## ジルコニアダイヤモンドFGバー

### ジルコニアダイヤモンド

 5本入 - 19.0	 5本入 9.00 22.0	 5本入 9.00 22.0	 5本入 7.00 22.0
801・018	856・018	856・018	862・014
ミディアム	ミディアム	ファイン	ミディアム
BA901230	BA901200	BA901210	BA901220



製品ページ

## ご利用ガイド

ご注文・お問い合わせ	ご注文方法は以下の方法からお選びいただけます。	
WEB 注文	<b>www.bajapan.co.jp</b>	BAJAPAN <input type="text"/> 検索
FAX	<b>050-3172-6060</b>	注文書をホームページからダウンロードできます。
電話	<b>072-656-2611</b>	受付時間：9:00～18:00（土日祝休み）
メール	<b>Support@bajapan.co.jp</b>	
ご注文にあたっての注意事項	<ul style="list-style-type: none"> <li>●ご注文の際は医院名・電話番号・住所・注文商品（型式または注文番号）・担当者名をお伝えください。</li> <li>●インターネットからご購入いただく際は、初回時に新規会員登録が必要です。</li> <li>●インターネットでご注文の際はクレジットカード支払いのみとなります。</li> </ul>	

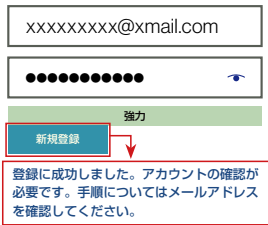
**WEB 会員登録** 初めて WEB サイトからご注文いただく際は新規会員登録が必要です。

### ○ 新規会員登録の手順

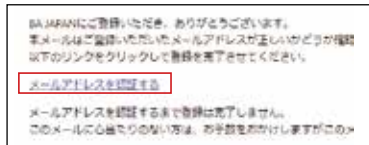
**1** メニューから「アカウント」を選択し「新規登録」を選んだら、メールアドレスとパスワード(英数10文字以上)を入力してください。



**2** 新規登録ボタンを押すと「登録に成功しました。」とメッセージが出ます。登録したアドレスにメールが届くので、確認してください。



**3** 【アカウントのメール認証】という件名でメールが届きます。本文内の「メールアドレスを認証する」というリンクをクリックして必要事項を入力してください。情報を入力したら登録完了です。



**お支払い** お支払い方法はクレジットカードまたは銀行振込からお選びいただけます。

クレジットカード	<p><b>対応カード</b> VISA / Master Card / JCB / American Express / Diners Club</p> <p>ご利用にはカードの登録が必要です。メンテナンス品ご返却の際、同封の請求書に登録用 QR コードが記載されておりますのでこちらからご登録をお願いいたします。弊社サービスご利用前の登録は出来かねますのでご了承ください。尚、WEB 注文の場合は都度クレジットカード情報入力が必要です。また、即時決済となりますのでご注意ください。</p> <p>※登録されたクレジットカードに対し、商品・サービス発送の21日後に自動決済されます。万が一、サービスや商品に不備があった場合は発送から21日以内にご連絡ください。お支払い方法は1回払いのみです。</p> <p>※カードをご登録いただいた時点で支払い期限の過ぎた過去請求分も、登録いただいたカードにて決済されます。</p>
----------	--

銀行振込 (GMO あおそらネット銀行)	<p>商品と同梱で請求書をお送りいたしますので、請求書記載の指定口座へ商品到着後21日以内にお振込みください。ホームページからの注文ではご利用いただけません。</p> <p>※振込手数料は恐れ入りますがお客様にてご負担いただけますようお願い申し上げます。</p>
-------------------------	---

**返品・交換** 製品の保証は下記の通り行っております。

- 保証**
- お届けした製品に不良・不備があった場合
    - ご購入いただいた製品はすぐにご確認いただき、不良や不備が見つかった場合は弊社にご連絡をお願いします。
  - 保証期間中のハンドピースの故障
    - 正常なご使用の範囲で故障した場合は、無償保証を受けることができます。ご購入時期とともに販売店もしくは弊社にご連絡ください。
    - ※ハンドピースは必ず注油を行った上でご使用ください。
    - 保証期間内でも次の場合には保証対象外となることがあります。
      - ・使用上の誤り、改造や不当な修理による故障または損傷
      - ・メンテナンス不足による故障、劣化や消耗品の交換
      - ・お買い上げ後の移設、輸送、落下による故障または損傷
      - ・火災、水害、地震、その他天災地変による故障または損傷
      - ・その他当社の責任とみなされない故障または損傷

●お届けした製品にご満足いただけなかった場合

**10日間**  
返品保証

製品ページに左記マークが付いている製品に関しましては10日間の返品保証を承っております。ご購入いただいた製品に万が一ご満足いただけなかった場合、規定を満たしているものに限り商品代金を返金いたします。詳細は以下「10日間返品保証規定」の項目をご覧ください。

- 10日間保証規定**
- 以下の項目の全てに当てはまる商品が対象になります。
- ✓ 返品保証対象の商品であること
  - ✓ 商品到着後10日以内の商品であること
  - ✓ 弊社から購入された商品であること
- 下記の場合は返品保証をお受けできません。予めご了承ください。
- ・返品保証対象外の商品
  - ・オイルスプレーなどの消耗品
  - ・返品保証期間（商品到着から10日）を過ぎた商品
  - ・他店でご購入いただいた商品
  - ・事前連絡なく商品をお送りいただいた場合
- ※ 返品にかかる「送料」および「振込手数料」はお客様負担となります。  
 ※ 繰り返し返品を要求される場合など、返品に応じられない場合があります。予めご了承ください。  
 ※ 本サービスは予告なく中止または内容が変更される場合があります。予めご了承ください。

- 返品保証のながれ**
1. 返品される前に下記「返品情報」をメール・FAX・電話いずれかの方法でご連絡ください。返品・返金方法をご案内いたします。
  2. 宅急便や郵便小包など履歴が残るもので商品をご返送ください。配送中の紛失・誤送などの事故に関しましては、弊社で責任を負いかねますので予めご了承ください。
  3. 返品状況の確認後5営業日以内に、振込手数料を差し引いた返金額をご指定の口座へお振込みいたします。尚、返品商品を着払いでご返送された場合は、着払い料金を差し引いてご返金します。予めご了承ください。

**返品情報**

右記の情報を FAX またはメールで弊社にお送りください。返品・返金方法をご案内いたします。

● 住所	● 返品理由
● 医院名	● 購入日
● 電話番号	● 返金先情報
● 担当者様名	・ 金融機関名
● 商品名	・ 支店名
	・ 口座番号
	・ 口座名義人

# 使えなくなったハンドピースを「スピーディー」にメンテナンスします。

## ハンドピースメンテナンスサービス

B.A.International は、25年以上にわたってハンドピースメンテナンス事業の最前線に立ち続けています。

メンテナンスボックスご請求はこちら▶



### 見積りは無料 到着後1営業日以内にご連絡

お見積りは無料。費用感を聞かれてからキャンセルしていただいてもかまいません。見積料やキャンセル料はいただいておりません。また弊社にハンドピースが到着してから1営業日以内にご提出しますので「送ったのに連絡が無い」という不安を無くします。弊社でメンテナンスが出来ない場合、弊社のハンドピースを特別価格でお見積りいたします。

※土日祝休み

### 満足いただけなければ全額返金

お預かりしたハンドピースは入念な品質管理の上で出荷していますが、万が一ご使用中に不具合があった場合、発送後3ヶ月以内であれば再度メンテナンスをさせていただきます。また、再対応をしても先生の満足する品質に達しない場合は初回発送後3ヶ月以内であれば全額返金いたします。返金時の振り込み手数料も弊社で負担します。

### 技術担当者がご相談に直接対応

「こちらの意図がなかなか伝わらない」というご経験はありませんか？先生からのお問い合わせに対して、**メンテナンス担当の技術者が直接対応するようにしています。**営業や事務員の介在なく、裁量権を持った技術スタッフが先生にご対応しますので、先生のお困りごとを的確に理解し、短期間で解決することができます。

### 見積り依頼は手間いらず

ハンドピースに不具合がある場合、**メンテナンスに出して頂くのが早ければ早いほど、低コストで済むことが多いです。**手間いらずかつスピーディーに見積りに出していただくため、送付キット「メンテナンスボックス」をご用意しました。弊社にご連絡いただければすぐに送付キットをお送りいたします！

### 見積りご了承の「翌日」に発送

お見積りにご回答後、すぐに作業をし、**発送します。**90%のハンドピースが見積のお返事翌日までにメンテナンスが完了し、出荷されています。(2022年9月実績)。部品のお取り寄せに時間がかかる場合はお見積り時にご連絡いたします。

### 到着後の後払い制

メンテナンス品発送のスピード化のために、後払いでのお支払いをお願いしています。メンテナンス完了品をお返す際に、お支払銀行口座を記載した請求書を同封しますので、メンテナンス品発送後3週間(21日)以内にお支払いください。また、**クレジットカード決済もご利用いただけます。**ハンドピースをお返す際に同封のご案内をご覧ください。



☎ 050-1742-7777

✉ Support@bajapan.co.jp

対応機種等、サービス内容にご不明点があればお気軽にお問い合わせください。

## 👉 ご依頼のながれ

郵送

メンテナンス品を弊社にお送りください。発送に便利なメンテナンスボックスをご用意しております。お気軽にご請求ください。

※ メンテナンスボックスをご利用の場合は投函から弊社到着まで3~5営業日かかります。

お見積り

メンテナンス品到着後1営業日以内にお見積りをご提示いたします。

※ 混雑状況によってはお見積りのご提示が遅れる場合がございます。

回答

お見積りのご回答をいただき次第、メンテナンス作業に入ります。

発送

メンテナンス品をご返送いたします。送料は無料です。

※ お見積りを全てキャンセルの場合は送料が払

お支払い

メンテナンス品到着後、21日以内に銀行振込またはクレジットカードにてお支払いをお願いします。

メンテナンスボックスで  
送料無料&かんたん発送▶





この文書に記載されている内容は、予告なく変更することがありますのでご了承ください。全ての写真は図示するためだけに使用します。KaVo®、MULTIflexLUX®はKaltenbach & Voigt & Co.の登録商標です。Sirona®はSirona Dental Systems GmbHの登録商標です。NSK®は株式会社ナカニシの登録商標です。W&H®はW&H Dentawerk Bürmoos GmbHの登録商標です。Bien-Air®はBien-Air Dental S.A.の登録商標です。Morita®は(株)モリタ東京製作所の登録商標です。Osada®は長田電気工業株式会社の登録商標です。B.A.Internationalの標準約款が適用されます。

©2018 B.A.International, Unit 7-10, Kingsthorpe, Northampton NN2 6NE, England. E&OE

販売製造元

**株式会社 B.A.International**

〒567-0881

大阪府茨木市上中桑1-1-37-2F

info\_jp@bainternational.com

TEL(代表) 072(656)2611